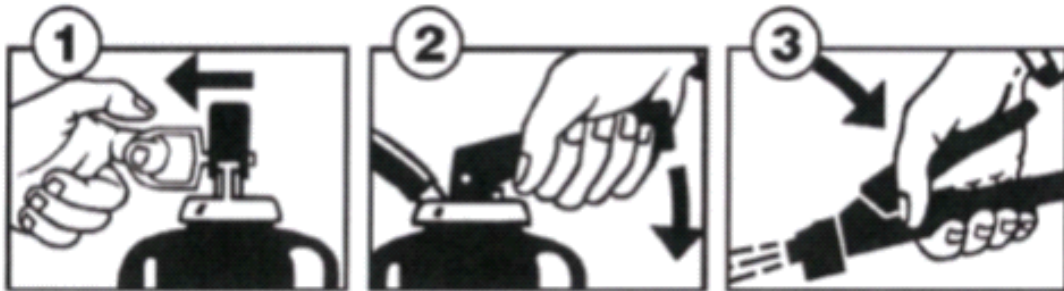


1	Inhoud : Polyethyleenglycol 300 en ethanol (verhouding 2 : 1). Er zijn 3 Medidecon-toestellen aanwezig op de site (2 bij de brandweer, 1 bij de med. dienst)	
2	Indicatie : Decontaminatie van huid gecontamineerd met fenolen, cresolen, aniline of xylolen (bij uitbreiding : water-onoplosbare producten). Supplementair aan de nooddouche, het slachtoffer moet altijd eerst onder de nooddouche gezet worden. Bedrijven : Styrolution, PIO/T, PU, MDI en aniline / nitrobenzeen.	
3	Let op : Brandbaar ! Niet te gebruiken bij oogletsels Niet inademen / Niet inslikken	
4	Gebruik :	
		
Bescherm u zelf met de nodige PBM's (veiligheidsbril, handschoenen).		
Trek de groene pin uit het toestel.		
Duw de hendel van het toestel in.		
Neem het mondstuk en duw de hendel in.		
Houd het mondstuk op 30 cm afstand van de huid.		
Zorg dat de vloeistof naar beneden kan aflopen.		
Dep het product af (niet wrijven !). Naspoelen met veel water		
Nadien de procedure herhalen (afwisselend met polyethyleenglycol en water) tot het product niet meer kan geroken worden (bijv. in het geval van fenol).		
5	Keuring/vulling De medidecon moet om de 2 jaar gekeurd worden. Het toestel kan na gebruik of bij keuring naar de interventiedienst gebracht worden. De interventiedienst stuurt het toestel naar Ludwigshafen waar hervulling of keuring gebeurt.	